

Val av skydds- och undersökningshandskar

Välj undersökningshandskar av nitril

Hur länge står handskarna emot ytdesinfektion?

Våra alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel innehåller höga koncentrationer av etanol och isopropanol och därför har vi ställt extra krav på genombrottstiderna¹ för dessa kemikalier. Alla upphandlade nitrilhandskar klarar minst 8 minuter i kontakt med etanol ($\geq 70\%$) och 10 minuter i kontakt med Isopropanol, IPA ($\geq 40\%$).

Vinylhandskar skyddar inte












Vinylhandsken rekommenderas inte vid kontakt med kemikalier, desinfektionsmedel eller rengöringsmedel eftersom den inte står emot kemikalier alls och handskens funktion kan påverkas negativt. Inga genombrottstider finns redovisade för vinylhandsken.

Vill du veta mer?

Se varuförsörjningen hemsida, www.varuforsorjningen.se, och broschyren Rätt handske.

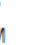

¹ Genombrottstid är den ungefärliga tid det tar för en kemikalie att tränga igenom handsken. Observera att genombrottstiderna kan variera och tiderna ska därför ses som en vägledning. För genombrottstider för fler kemikalier kontakta varuförsörjningen.

Typ av arbete	Handske	Kommentarer	Material
Allmän vårdhandske	Evercare nitril vit 	Undersökningshandske Vit Färgkodning efter storlek: XS =  L =  S =  XL =  M = 	Nitril
Laboratoriearbete Livsmedelshantering Ambulanssjukvård, (-18°C) Cytostatikahantering	Mediguard Blue 	Undersökningshandske Blå	Nitril
Laboratoriearbete Ambulanssjukvård, (-18°C) Cytostatikahantering Extra lång	Klinion Extra Protection, 	Undersökningshandske Blå - Lång	Nitril
Arbete med plastgips Laboratoriearbete Cytostatikahantering Tandvårdsarbete Extra lång	Evercare nitril X-lång 	Undersökningshandske Blå – Extra lång Genombrotstider för trietylenglykoldimetakrylat (TEGDMA) och 2- hydroxyetylmetakrylat (HEMA) ≥15 min Färgkodning efter storlek: XS =  L =  S =  XL =  M = 	Nitril
Kemikaliehantering	SHIELDSkin Orange Nitrile 300 	Laborariehandske extra kemikalietålig, Orange Genombrotstider för metanol, aceton, xylene, hexan, etylacetat och acetonitril ≥1 min	Nitril
För personer med allergi Allmän vårdhandske Laboratoriearbete Livsmedelshantering	Micro-Touch Nitrile Accelerator-Free 	Acceleratorfri ² undersökningshandske Blå	Nitril
Endast för personer med kontaktallergi Patientvård		Vinylhandske Ingen kemikalietålighet	Vinyl PVC

² Acceleratorer är en av de vanligaste kemikalierna i engångshandskar som orsakar kontaktallergi.