


DI-60HL

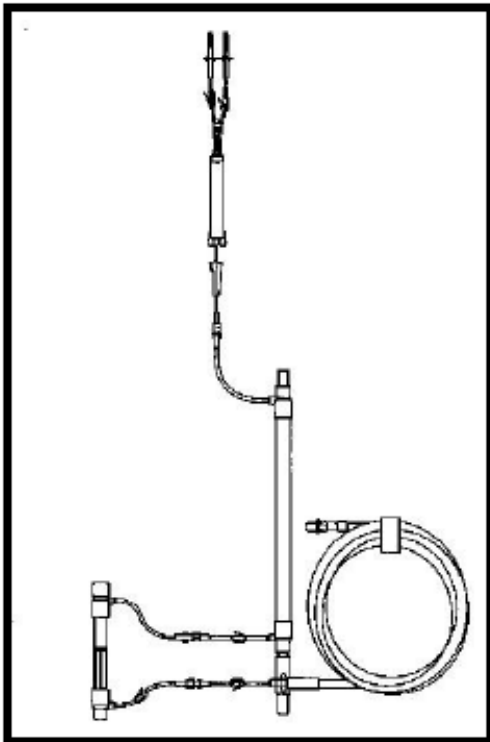

DI-60HL har en tjock trippellumenslang som kopplas till patient. Denna saknas på DI-100 och DI-300 utan de har vanliga enlumen slangar fram till patient!

Rullklämman på DI-60HL sitter direkt efter droppkammaren. På DI-100 och DI-300 sitter de på patientdelen.

DI-60HL och DI-100 har samma filter som har art nr F-10 om man vill byta ut det!


DI-300 har ett annat större filter som har art nr F-30

DI-300 har 3 st droppkammare med tillhörande spikar.

Flödeshastigheter och fyllnadsvolymer skiljer sig mellan seten. Snabbast flödeshastighet har DI-300 och långsammast är DI-60HL som har en max flödeshastighet på 570 ml/min

Alla set är snarlika att koppla upp. Se medföljande bruksanvisning för varje set.

DI-100

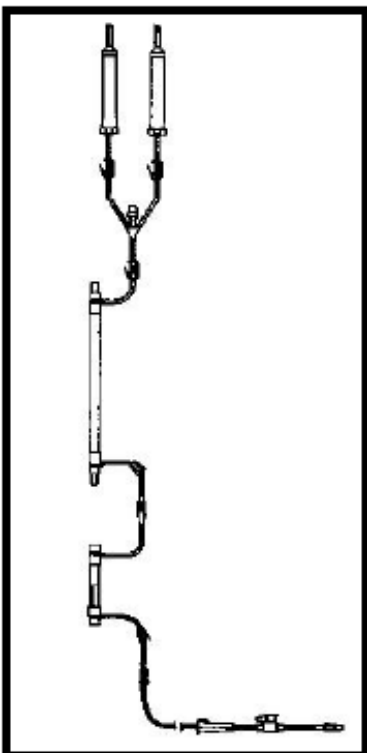

DI-300

